



PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur manuellement R7431182000
Couleur Description	Blanc PLUS siège de douche 450, assise évidée, rabattable, avec dossier et accoudoirs. Réglable en hauteur de 195 mm. Les accoudoirs sont rabattables et réglables en hauteur indépendamment du siège et du dossier. Façade glissière-support verticale gris clair. Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium. La surface de préhension antidérapante des accoudoirs est en SEBS doux. Ils sont renforcés d'une âme en fibres de verre et nylon. Livré sans vis de montage. PLUS siège de douche 450, assise évidée, rabattable, avec dossier et accoudoirs. Réglable en hauteur de 195 mm. Les accoudoirs sont rabattables et réglables en hauteur indépendamment du siège et du dossier. Façade glissière-support verticale gris clair. Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium. Les accoudoirs en aluminium et SEBS doux. Livré sans vis de montage.
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur 175 mm Poids maximum de l'utilisateur (siège) : 200 kg. Charge maximale (accoudoirs) : 55 kg. Lorsque le siège est chargé de 200 kg, chaque vis de montage est chargé de 24 kg. <i>Les PLUS sièges de douche ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>



Article Numéro article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur manuellement R7431182000
Matériaux Ergonomie Fonctions	L'assise et le dossier sont principalement faits de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et moulée autour d'une armature en contreplaqué de marine et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent. Les accoudoirs sont principalement composés d'aluminium anodisé 10 microns, avec, à leur extrémité, une surface de préhension antidérapante en SEBS doux et sont renforcés d'une âme en fibres de verre et nylon. Les accoudoirs au niveau de l'articulation sont aussi recouverts de SEBS doux. Le cylindre des charnières est recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable. Siège ergonomique – surface d'assise 450 x 437 mm. Rabattables, le siège et les accoudoirs permettent de dégager de l'espace supplémentaire au sol, si nécessaire. Le siège est fabriqué dans un matériau doux et antidérapant qui n'est jamais froid au toucher tout en offrant un bon confort d'assise. Le siège de douche est facile à déplacer si un utilisateur souhaite prendre une douche debout. L'extrémité des accoudoirs est un appui précieux, quand on s'assied ou se relève et procure aussi à l'utilisateur une sensation précise de la limite de l'appui. Les accoudoirs sont réglables en hauteur indépendamment du siège et du dossier.
Garantie Nettoyage	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation. Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Terralin protect Dismonzon Plus NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor Petrosol Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.



PRESSALIT®

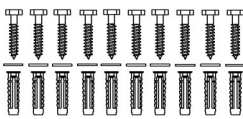
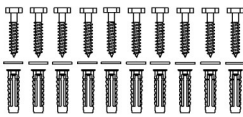
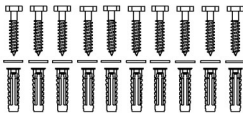
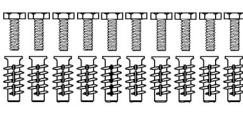
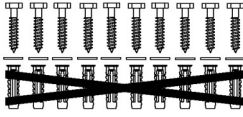
Article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	R7431182000



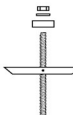
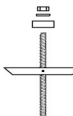
PRESSALIT®

Article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur
Numéro article	R7431182000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8662 - Kit vis de montage, 10 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur manuellement R7431182000		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	