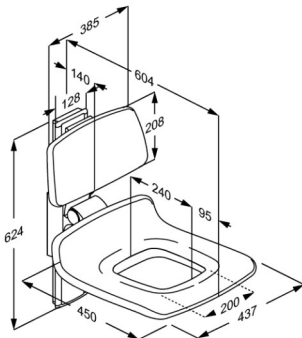




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur manuellement R7421112108
Couleur Description	Bleu foncé (RAL 5011)  PLUS siège de douche 450, assise évidée, rabattable, avec dossier. Réglable en hauteur de 360 mm (assise). Façade glissière-support verticale gris anthracite. Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium. Livré sans vis de montage. PLUS siège de douche 450, assise évidée, rabattable, avec dossier. Réglable en hauteur de 360 mm (assise). Façade glissière-support verticale gris anthracite. Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium. Livré sans vis de montage.
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur 360 mm Poids maximum de l'utilisateur : 200 kg. Lorsque le siège est chargé de 200 kg, chaque vis de montage est chargé de 24 kg. <i>Les PLUS sièges de douche ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
Matériaux Ergonomie Fonctions	L'assise et le dossier sont principalement faits de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et moulée autour d'une armature en contreplaqué de marine et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable. Siège ergonomique – surface d'assise 450 x 437 mm. Rabattable, le siège permet de dégager de l'espace supplémentaire au sol, si nécessaire. Le siège est fabriqué dans un matériau doux et antidérapant qui n'est jamais froid au toucher tout en offrant un bon confort d'assise. Le siège de douche est facile à déplacer si un utilisateur souhaite prendre une douche debout.



PRESSALIT®

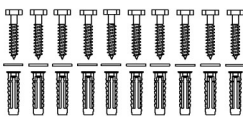
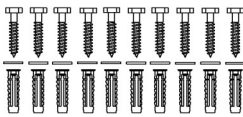
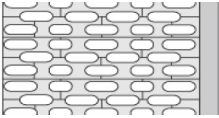
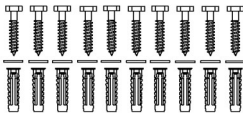
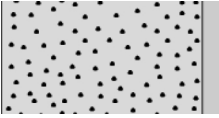
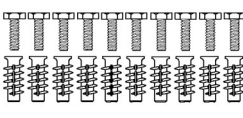
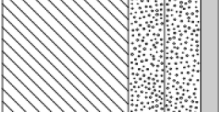
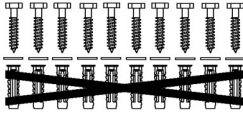
Article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur
Numéro article	R7421112108
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Terralin protect Dismonzon Plus NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor Petrosol Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.



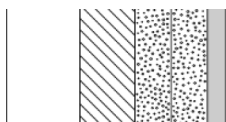
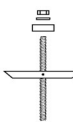
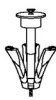
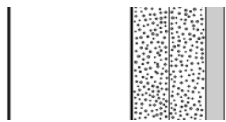
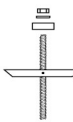
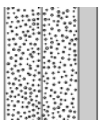
PRESSALIT®

Article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur
Numéro article	R7421112108

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8662 - Kit vis de montage, 10 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8612 - Kit vis de montage, 10 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	PLUS siège de douche 450 assise évidée, réglable en hauteur manuellement R7421112108		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	