




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS dossier, amovible R6409000
Couleur	Blanc
Description	VVS:777530400 NRF:6317039 EAN:5708590366296 HMI: 124211  PLUS dossiers sont disponibles en différentes couleurs et versions ; hauteur fixe ou réglable. Les dossiers peuvent être montés directement sur le mur derrière une toilette sans réservoir ou sur l'ensembles wc de Pressalit. PLUS dossier, 385 x 209 mm, rembourré. Hauteur fixe, montage sur SELECT TL1, TL2, TL3 ou TL4 ensembles WC. Amovible sans outils et facile à attacher à nouveau. Matériaux : aluminium et mousse de polyuréthane douce avec noyau en bois. Pour montage sur SELECT ensemble de WC, vis de montage incluses.
Réglage Capacité du produit	Montage fixe Charge maximale admissible : 50 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg. Lorsque le dossier est chargé de 50 kg, chaque vis de montage est chargé de 118 kg. <i>Le dossier doit être en mesure de supporter le poids d'une personne s'appuyant dessus.</i> <i>Le dossier n'est pas conçu pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au dossier reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le dossier chargé à 50% du poids maximal de l'utilisateur.</i> <i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 50 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaldrait à un utilisateur pesant 100 kg qui se pencherait sur le dossier.</i>
Matériaux	Le dossier est fait de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

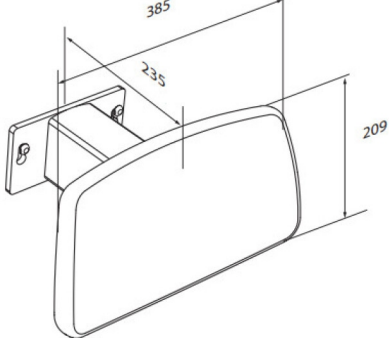

PRESSALIT®

Article	PLUS dossier, amovible
Numéro article	R6409000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Terralin protect Dismonzon Plus NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor Petrosol Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

pressalit.com

PRESSALIT®